

Manuel de l'utilisateur, Vibrateur de poche Belleman Visit (FR)



Le Vibrateur de poche Belleman Visit fait partie du système Visit et vous avertit sous forme de vibrations et de signaux lumineux lorsque la sonnette de la porte ou le téléphone sonne.

Procédez de la manière suivante !

1. Ouvrez le compartiment à pile sur la face avant du Vibrateur de poche et mettez une pile de 1,5 V (type LR03) ou une pile rechargeable (NiMH AAA). Pour l'utilisation de la pile rechargeable et du Chargeur, référez-vous au mode d'emploi fourni avec le Chargeur.
2. Appuyez sur le bouton test d'un émetteur Bellman Visit. Le Vibrateur de poche vibre et une lampe témoin s'allume.
3. Fixez le Vibrateur de poche sur vos vêtements ou placez-le dans une poche de façon à sentir les vibrations.

Divers

Portée

La portée entre l'émetteur et le récepteur est de 30 mètres, celle-ci peut être réduite en fonction de l'épaisseur des murs et de leur composition. Des murs épais en béton armé en limitent la portée.

Fréquence radio

A la livraison, toutes les unités sont réglées sur la même fréquence radio. Si vous changez la fréquence de l'émetteur, vous devrez également changer celle du Vibrateur de poche en procédant de la façon suivante:

Tenez le Vibrateur de poche devant l'émetteur. Appuyez sur le bouton d'arrêt du Vibrateur de poche pendant environ 5 secondes, les lampes témoins clignotent jaune et vert. Appuyez ensuite sur le bouton de test de l'émetteur. Le Vibrateur de poche vibre et toutes les lampes témoins clignotent alternativement: la fréquence radio a été changée.

Pile

Le Vibrateur de poche Belleman Visit fonctionne avec une pile de 1,5 V (type LR03) ou une pile rechargeable (NiMH AAA) placée dans le compartiment à pile. La durée de vie est d'environ 1 mois pour une pile de type LR03 et 2 semaines pour une pile rechargeable. La lampe témoin de la pile clignote et les vibrations faiblissent lorsque la pile est usée ou déchargée. Pour retirer la pile, appuyez sur le bouton éjecteur de pile. Pour recharger la pile, référez-vous au mode d'emploi fourni avec le Chargeur.

Lampe témoin de la pile

La lampe témoin clignote rouge sur la face avant du vibreur lorsque la pile est usée ou doit être rechargée.





Bouton d'arrêt

Le bouton d'arrêt est situé sur la face avant du Vibrateur de poche. Les vibrations peuvent être arrêtées en appuyant sur le bouton d'arrêt. La lampe témoin reste allumée pendant 30 secondes après l'arrêt des vibrations. Le bouton d'arrêt peut être également utilisé pour changer les fréquences radio. Référez-vous au paragraphe "Fréquence radio".

En cas de panne


Une panne n'est pas toujours grave. Lisez attentivement la liste de contrôles possibles avant de contacter votre revendeur.

Description	Intervention
Le Vibrateur de poche ne réagit pas lorsqu'il reçoit un signal des émetteurs.	1) La pile est peut être usée. Référez-vous au paragraphe "Pile". 2) Vérifiez également que l'émetteur et le Vibrateur de poche sont réglés sur la même fréquence. Référez-vous au paragraphe "Fréquence radio".
Le vibrateur est activé sans qu'aucun émetteur ne lui ait adressé de signaux.	1) Changez d'abord la fréquence radio de tous les émetteurs Bellman Visit puis celui du récepteur. Référez-vous au paragraphe "Fréquence radio".

Emetteur	Couleur	Symbole	Type de vibrations	Durée des vibrations
1) Emetteur cris de bébé	1) Orange		— — — — —	30 secondes (les vibrations peuvent être arrêtées en appuyant sur le bouton d'arrêt).
2) Emetteur de porte	2) Vert		— — — — —	
3) Emetteur de téléphone	3) Jaune		— — — — —	
4) Alarme incendie	4) Rouge		—————	Jusqu'à l'arrêt de l'avertisseur d'incendie.

Description du produit

- 1) Etiquette
- 2) Compartiment à pile
- 3) Bouton éjecteur de pile
- 4) Diodes lumineuses
- 5) Bouton d'arrêt
- 6) Lampe témoin de la pile
- 7) Clip
- 8) Contacts de recharge

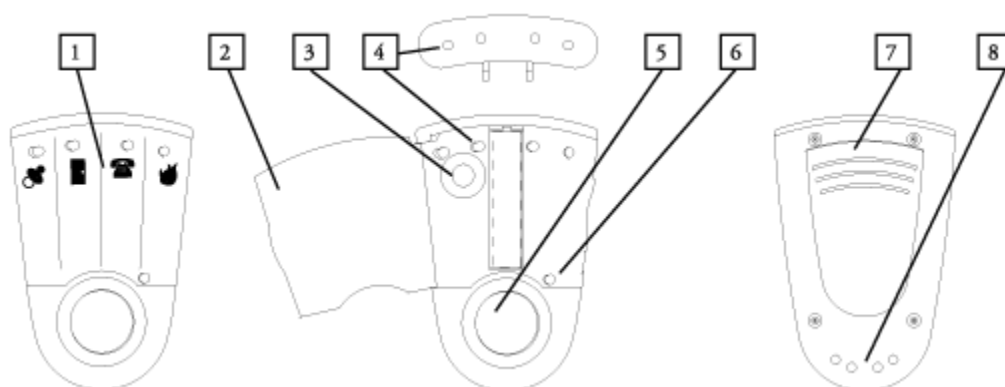

Address:
Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30,
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden

Our office hours are:
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

Telephone: +46 31 682820
Fax: +46 31 682890
Homepage: www.bellman.com
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se